


## Tekniske data

<b>Mål:</b>	<b>TVILLING Cyklen er fabrikeret med:</b>
<b>Længde:</b> 205 cm	<b>Stel:</b> Kraftig stålramme lakeret med miljøvenlig pulverlak
<b>Bredde:</b> 105 cm	<b>Fælg:</b> Alu med V2A eger
<b>Sædehøjde:</b> 61 cm	<b>Dæk:</b> Schwalbe Marathon
<b>Sædedybde:</b> 40 cm	<b>Lys:</b> LED batteri lygter, for og bag
<b>Ryglæn højde:</b> 35 cm	<b>Bremser:</b> Tromlebremse med parkeringsbremse & hydrauliske skivebremser
<b>Vægt:</b> 62 kg	<b>Gear:</b> 7 gear med fodbremse
<b>Max belastning:</b> 2 x 120 kg	<b>Sæder:</b> Slidfast materiale med polstring, begge sæder kan indstilles, drejbart passagersæde
<b>Skridtlængde:</b> 65-90 cm	
<b>El System:</b> Heinzmann	

### Ladning:

- Det er en fordel at lade batteriet så ofte som det er muligt.
- Hvis cyklen bruges dagligt, sæt cyklen til ladning efter endt brug.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 uge, anbefales det at tage laderen fra 24 timer efter endt ladning.
- Hvis cyklen henstilles i mere end 1 måned skal den oplades i 24 timer 1 gang om måneden.
- Den bedste temperatur er ca. 20°.
- Laderen slår automatisk fra ved 0°.

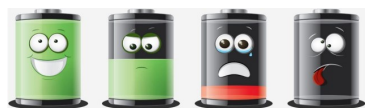

## Tvilling

### Den sociale cykel

I designet på TVILLING Cyklen er der i særlig grad taget hensyn til grupper af gangbesværede, ældre og personer med handicap. En Cykel hvor man simpelthen bare gerne vil være to om oplevelsen.

TVILLING Cyklen er det oplagte valg for ældre og gangbesværede.

Denne nye parcykel, er designet så man ikke skal træde over stellet for at komme på plads. Ligeledes er der et drejebart sæde.

Sammen med det justerbare styr, giver det en mere sikker og rolig ind- og udstigning.

Denne cykel er et oplagt valg hvis man ønsker samtaler under cykelturen.

TVILLING Cyklen kan også leveres med hjælpemotor.

## Pleje af cyklen

Regelmæssig vedligeholdelse af cyklen er vigtig af hensyn til funktionsikkerheden, og for at cyklen ser pæn ud. Derfor bør følgende punkter overholdes:

- Regelmæssig vedligeholdelse udført af en fagmand gør, cyklen bevarer sin værdi. Du kan selv gøre følgende for at undgå rust og andre skader:
- Lad ikke snavs indtørre, men vask det af med det samme med vand og en blød klud eller svamp. Brug aldrig en højtryksrensers til rengøringen, da det kan beskadige lejer, lak eller finish.
- Brug ikke skrappe rengøringsmidler.
- Lakskader skal udbedres straks.
- Dele, der er følsomme over for rust, skal behandles grundigt med et egnet konserverings- og plejemiddel, særligt op til og i vinterperioden.
- Lad ikke cyklen stå udenfor uden at være overdækket, Faaborg Rehab Technic ApS frasiger sig ethvert ansvar for misligholdelse af cyklen.
- Tjek altid om der er luft nok i dækket før du kører en tur. For lidt luft kan gøre cyklens træk evne svag.

## Bemærk:

Garantien bortfalder, såfremt der er foretaget ændringer/reparationer af personer, som ikke er godkendt eller anvist af Faaborg Rehab Technic ApS

Garanti reparationer skal foregå på værkstedet hos Faaborg Rehab Technic ApS, hvis du ønsker os på besøg skal du betale kørselsomkostningerne .

Hvis du efter læsning af denne brugervejledning savner svar på yderlige spørgsmål vedrørende din nye cykel, er du altid meget velkommen til at kontakte Faaborg Rehab Technic ApS

Politikken for Faaborg Rehab Technic ApS er til stadighed af at forbedre kvaliteten og drift sikkerheden af vores produkter. Vi forbeholder os derfor retten til, uden forudgående at ændre denne vejledning.

## Til- og frakobling af passager:


Frakobling sker når gearet på stellet står i første gear.



Tilkobling sker når gearet på stellet står i andet eller tredje gear



- A Assistance level
- B Cykel lys
- C Batteri Niveau
- D Aktuelle hastighed
- E Funktions display
- F Display linje

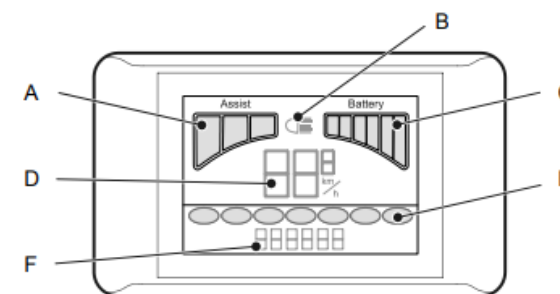

**Tænd:** Hold "MODE" knappen inde i ca. 3 sekunder, indtil display tændes.

**Sluk:** Hold "MODE" knappen inde i ca. 3 sekunder, indtil display slukkes.



**Hastighed op:** For at få et højere hjælpeniveau, tryk på pil op.



**Hastighed ned:** For at få et lavere hjælpeniveau, tryk på pil ned.